

Sommaire

I- Principe du dosage acido-basique

1-1/ Définition du dosage

1-2/ Mode opératoire d'un dosage

II- Dosage d'une solution d'acide éthanoïque

2-1 / Expérience

2-2 / Équation de la réaction du dosage

2-3 / Détermination du point d'équivalence

2-4/ Relation d'équivalence

2-5/ Détermination du taux d'avancement final de la réaction

III- Dosage d'une solution d'ammoniaque

3-1 / Expérience

3-2 / Équation de la réaction du dosage

3-3 / Détermination du point d'équivalence

3-4/ Relation d'équivalence

I- Principe du dosage acido-basique


1-1 / Définition du dosage

Le dosage (ou titrage) consiste à déterminer la concentration d'une espèce chimique présente dans une solution dite solution titrée en faisant réagir cette solution avec une solution de concentration connue dite solution titrante.

La réaction du dosage doit être rapide, totale et unique, c'est dire que l'état final du système doit être atteint dans une courte durée et le réactif limitant est toujours entièrement consommé et la réaction ne doit pas être en compétition avec d'autres réactions.

1-2 / Mode opératoire d'un dosage

On introduit dans un bécher à l'aide d'une pissette jaugée un volume de la solution à titrer, puis on lui ajoute progressivement à l'aide d'une burette la solution titrante tout en utilisant un système d'agitation afin d'homogénéiser le mélange.

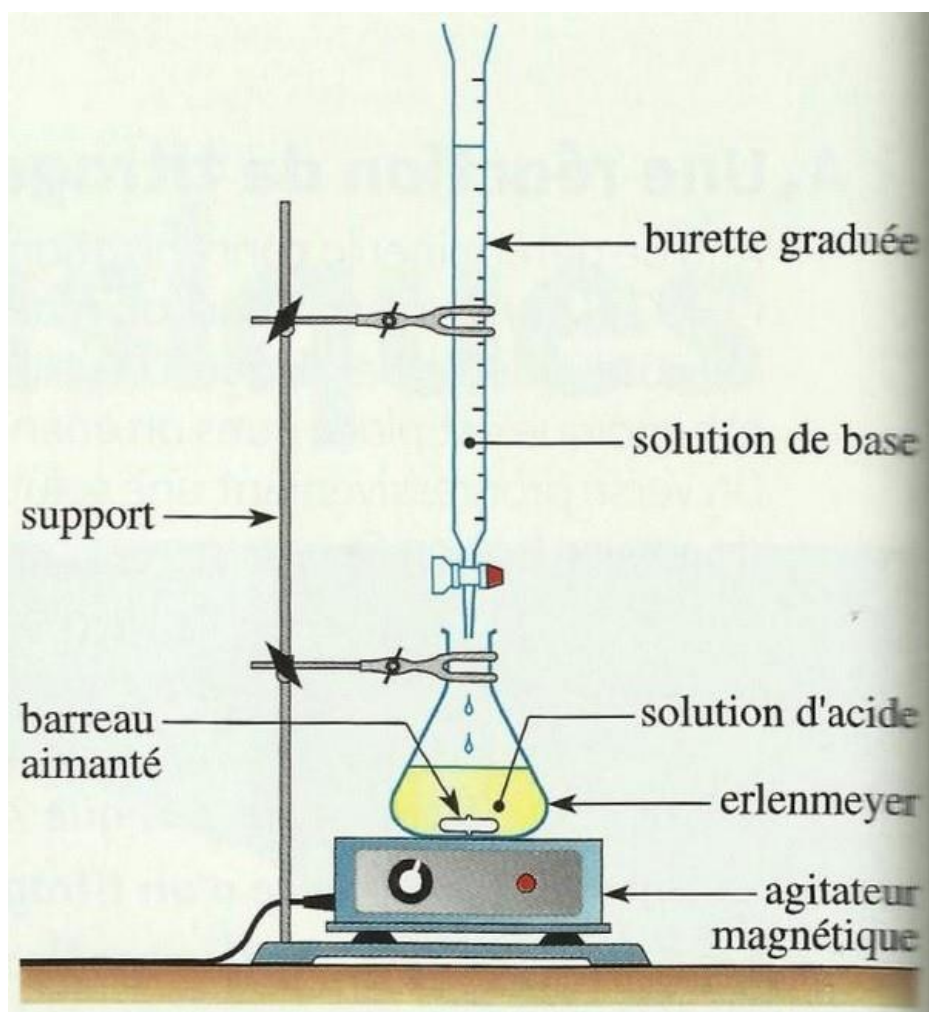


II- Dosage d'une solution d'acide éthanoïque

2-1 / Expérience

Placer, dans un b cher, un volume $V_A = 20,0\text{ mL}$ de solution d'acide  thano ique CH_3COOH de concentration C_A inconnue.


Y ajouter un volume V_B de solution de soude ($\text{Na}^+ + \text{HO}^-$) de concentration $C_B = 20,0\text{ mmol. L}^{-1}$.

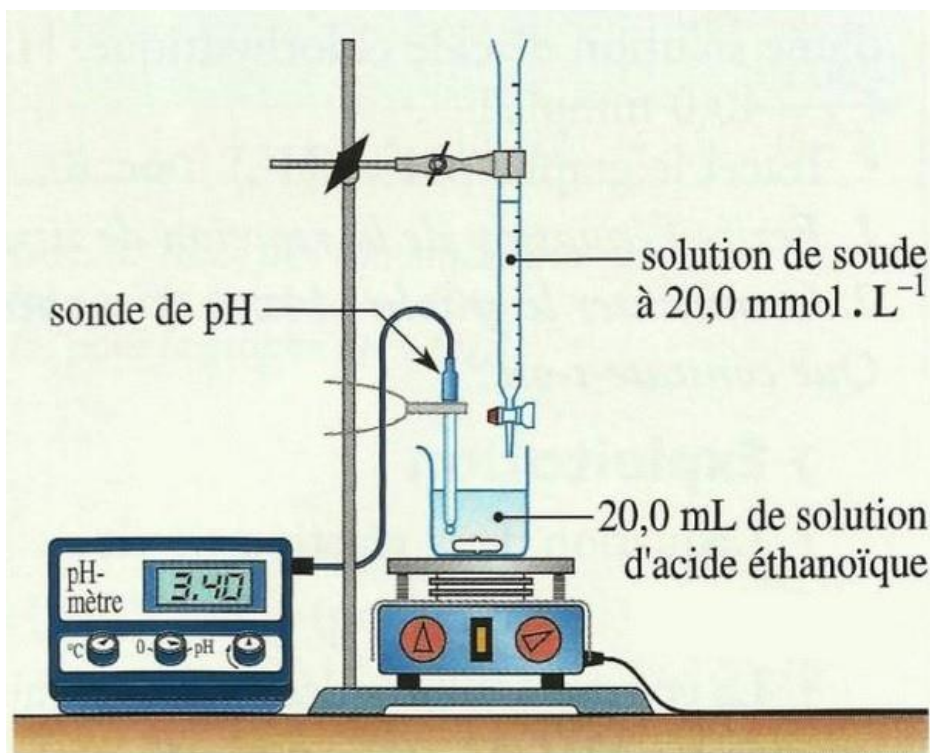

On mesure le pH du mélange après chaque addition et on indique les valeurs obtenues dans le tableau suivant :

V_B (mL)	0	2	4	8	10	12	14	14,5	15	15,5	16	18	20	24	26	30
pH	2,9	3,4	3,6	3,9	4,1	4,5	5	5,8	7,6	10	11	11,3	11,4	11,5	11,6	11,7


On trace la courbe représentant la variation du pH en fonction du volume V_B de soude versé :

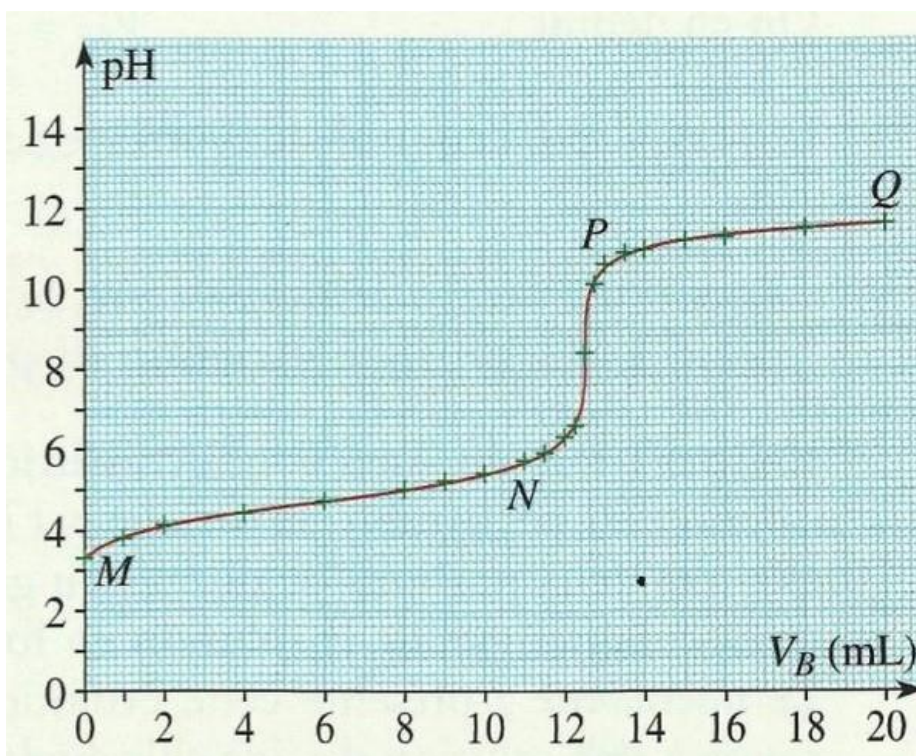

2-2 / Équation de la réaction du dosage

Les ions Na^+ sont inactifs, ils ne participent pas à la réaction du dosage.

L'équation de la réaction du dosage est :

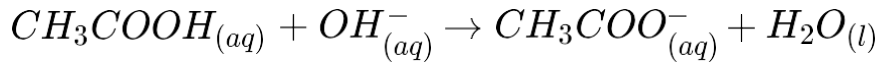

C'est une réaction totale.

2-3 / Détermination du point d'équivalence

Méthode des tangentes :

On trace la droite Δ tangente à la courbe au point A et on trace la droite Δ' parallèle à au point

B, puis on représente le segment $[H, H']$ perpendiculaire à Δ et à Δ' .

Ensuite on trace la droite Δ'' médiatrice du segment $[H, H']$. Cette dernière se coupe avec la courbe $pH = f(V_B)$ au point E.

Coordonnées du point d'équivalence E :
$$\begin{cases} V_{BE} = 15mL \\ pH_E \approx 7,8 \end{cases}$$

Méthode d'utilisation de l'indicateur coloré :

Expérimentalement on détermine le volume d'équivalence en utilisant un indicateur coloré, lorsque sa couleur change brusquement à la teinte sensible on est à l'équivalence, on obtient donc la valeur du volume de soude versé à l'équivalence.


Dans ce dosage le rouge de crésol est convenable car sa zone de virage $[7,2 - 8,8]$ contient $pH_E = 7,8$.

Méthode de la courbe dérivée :

Cette méthode permet de déterminer le volume d'équivalence, elle consiste à tracer, à l'aide

d'un logiciel la courbe dérivée : $\frac{dpH}{dV_s} = f(pH)$

Le volume d'équivalence correspond à l'abscisse du maximum de cette courbe :

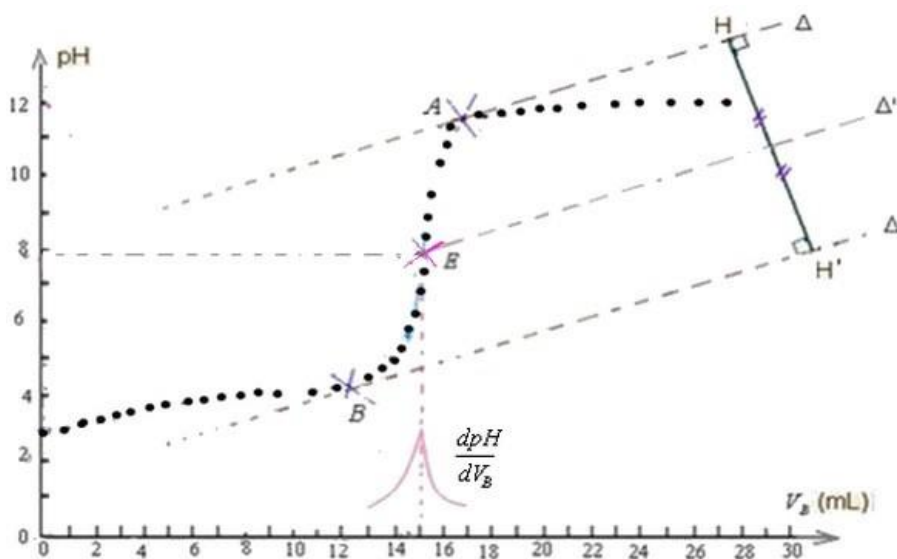

2-4 / Relation d'équivalence

Avant l'équivalence, OH^- est le réactif limitant

Après l'équivalence, CH_3COOH est le réactif limitant.

À l'équivalence le mélange est stœchiométrique : $n_i(CH_3COOH) = n_i(OH^-)$

La relation d'équivalence est donc : $C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{BE}$

D'où : $C_A = \frac{C_B \cdot V_{BE}}{V_A} = 1,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$

2-5 / Détermination du taux d'avancement final de la réaction

Pour montrer que la réaction du dosage est totale, il suffit de montrer que $\tau = 1$.

Traçons le tableau d'avancement de la réaction au moment de versement du volume $V_{B_{versé}} = 10 \text{ mL}$ de soude .

D'après la courbe du dosage, le pH correspondant à ce volume est $pH = 4,1$.

$n_a(CH_3COOH) = c_a \cdot v_a = 0,3 \text{ mmol}$

$n_a(OH^-) = c_b \cdot v_b = 0,2 \text{ mmol}$


$$\tau = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{0,2}{0,2} = 1$$

Donc la réaction est totale.

III- Dosage d'une solution d'ammoniaque

3-1 / Expérience


On verse dans un bécher un volume $V_B = 20 \text{ mL}$ d'une solution d'ammoniaque NH_3 de concentration c_B inconnue, puis on lui ajoute progressivement à l'aide d'une burette graduée une solution d'acide chlorhydrique ($H_3O^+ + Cl^-$) de concentration $c_A = 1,2 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$.

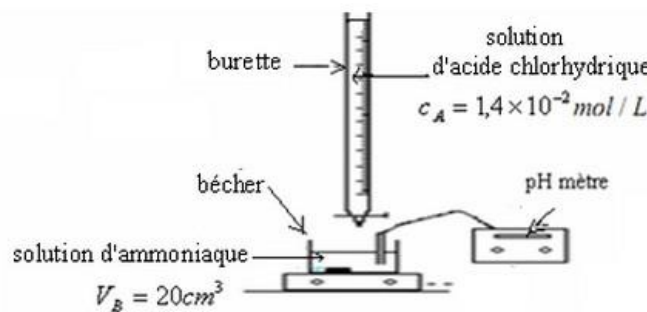

3-2 / Équation de la réaction du dosage

Les ions Cl^- sont inactifs, ils ne participent pas à la réaction du dosage.

l'équation de la réaction du dosage :

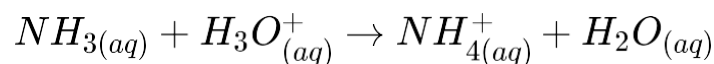

C'est une réaction totale.

3-3 / Détermination du point d'équivalence

Méthode des tangentes :


Coordonnées du point d'équivalence E :
$$\begin{cases} V_{AE} = 14,4 \text{ mL} \\ pH_E \approx 5,6 \end{cases}$$

Méthode de la courbe dérivée :

Elle conduit dans ce cas à : $V_{AE} = 14,4 \text{ mL}$

La méthode de l'indicateur coloré :

D'après le tableau des indicateurs colorés on constate que c'est le rouge de méthyle qui est convenable pour ce dosage, car sa zone de virage $[4,2 - 6,2]$ contient le $pH_E = 5,6$.

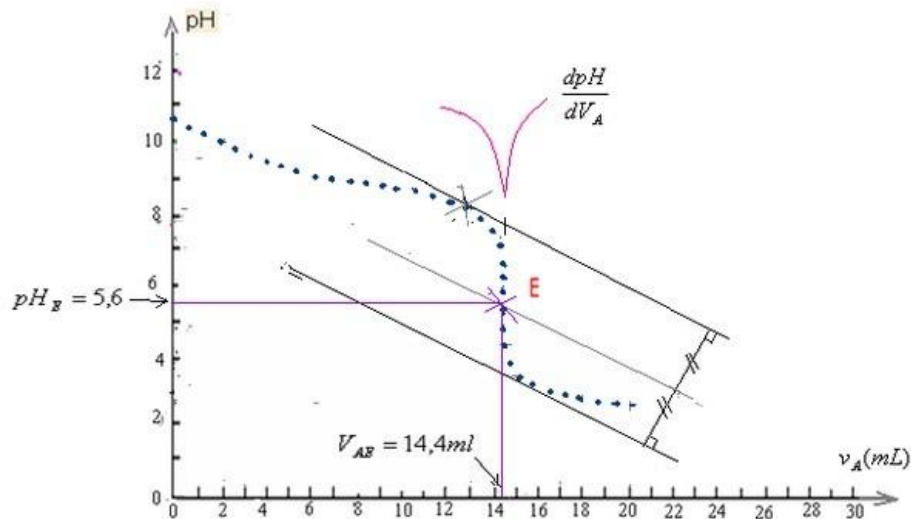

3-4 / Relation d'équivalence

Avant l'équivalence, H_3O^+ est le réactif limitant, et après l'équivalence NH_3 est le réactif limitant.

À l'équivalence le mélange est stœchiométrique : $n_i(H_3O^+) = n_i(NH_3)$

La relation d'équivalence est donc : $C_A \cdot V_{AE} = C_B \cdot V_B$

D'où : $C_B = \frac{C_A \cdot V_{AE}}{V_B} = 10^{-2} \text{ mol/L}$